

IVIS Spectrum 小动物活体成像仪使用流程

20171219

一、开机

- 1、打开稳压电源（SANTAK）
- 2、打开电脑，登录。用户名：administrator，密码：password。
登录 LIMS 系统。
- 3、打开仪器开关：仪器开关位于右侧背后中间的位置。
- 4、检查仪器正面的待机键处于打开状态（请保持在此位置，仪器关机时也无需关闭）

二、仪器初始化


1、确保仪器内未放置样品。



- 2、双击电脑桌面 IVIS 软件图标
- 3、出现用户和密码提示框，User ID 选择“CLS”，不输入 Password，点击“OK”进入拍摄界面



- 4、点击右下角“Initialize”仪器开始初始化，当温度显示条为绿色才可进行数据采集（等待约 5~10 分钟）

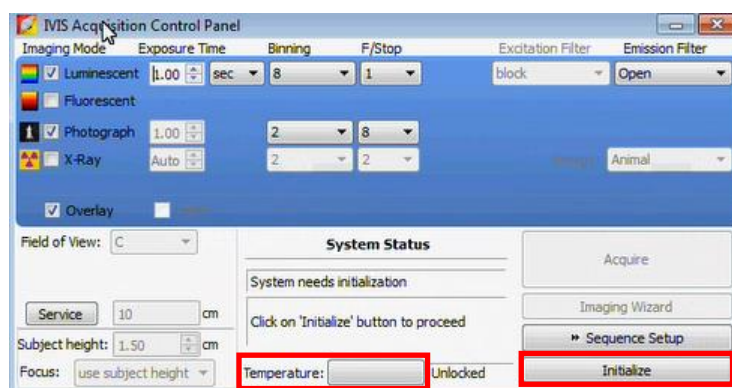

（关机过程见背面）

三、关机

- 1、关闭拍摄软件（**关硬件前必须先关闭软件!**）。
- 2、关闭仪器背后的开关。
- 3、退出 LIMS 系统，关闭电脑（如果需要处理数据可不关闭电脑）。

注：

- （1）关硬件前必须先关闭软件！处理数据可以重新打开软件，不做初始化“Initialize”。
- （2）如果使用频繁可以不关闭软、硬件和电脑（关闭软件，相机即停止工作并升温。使用间隔超过 1 小时，关闭软件可以减少相机损耗）。每天最后使用的人，用完必须关闭电脑。
- （3）请用 LIMS 系统上传数据或光盘刻录数据，不允许使用 U 盘进行数据拷贝。